

- Legen Sie über die Nadelplatte eine sterile Mullkomresse und kleben Sie darüber ein großflächiges Pflaster, um der Punktionsstelle genügend Schutz zu gewähren.
- Verbinden Sie das Produkt entsprechend der Vorgaben der Gesundheitseinrichtung mit der Infusion.
- Starten Sie die Infusion durch Öffnen der Schlauchklemme.
- Nach Beendigung der Infusion oder Injektion spülen Sie den Port gemäß den Anweisungen der Gesundheitseinrichtung.

Nadelentfernung

- Bereiten Sie entsprechend den Empfehlungen der Hygienevorschriften der Gesundheitseinrichtung die punktierte Stelle vor. Arbeiten Sie unter aseptischen Bedingungen.
- Entfernen Sie das Verbandsmaterial über der Einstichstelle. Schließen Sie die Schlauchklemme.
- Fassen Sie die Gripstick® System am Rand an. (Abb.6)



Abb. 6

- Ziehen Sie die Nadel senkrecht aus dem Portsystem.
- Entsorgen Sie das System in einen Kanülenabwurfbehälter oder entsprechend den Vorgaben der Gesundheitseinrichtung. (Abb. 7)



Abb. 7

Liste der zugelassenen kompatiblen Geräte, zur Verwendung in Kombination

Die Gripstick® System ist mit allen gängigen Portsystemen kompatibel. Der Arzt ist aufgefordert, die Materialverträglichkeit von Medikament und Gripstick® System zu prüfen. Teile des Produktes bestehen aus DEHP-freiem PVC.



Vertrieb:
OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstraße 8, 32427 Minden,
Deutschland



Hersteller:
VitalAire GmbH
Bornbarch 2,
22848 Norderstedt,
Deutschland

**Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice berät Sie gern.**


OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstraße 8 • 32427 Minden

Tel. +49 571 974 34-0
Fax +49 571 974 34-39
info@omtmed.com
www.omtmed.com

OMT – ein Unternehmen der



Gebrauchsanweisung Gripstick® System | V.01 | 08/2025 | Alle Rechte vorbehalten

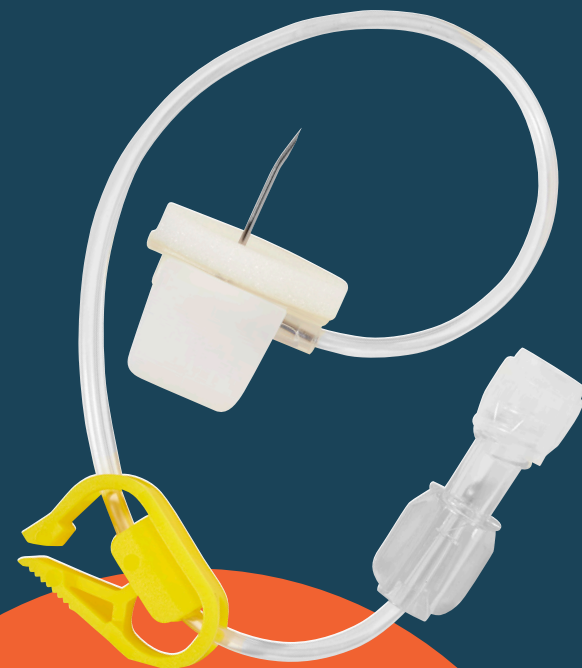

Gebrauchs- anweisung

Gripstick® System

Produktbeschreibung

Die Gripstick® System ist eine Portnadel mit flacher, runder Oberfläche, abnehmbaren Griff, Schaumstoffunterlage, Schlauchverlängerung (20 cm), Sicherheitsklemme und Luer-Lock-Verbindung.

Verwendungszweck

Die Hubernadeln/Portnadeln sind für die Infusion von Medikamenten und Nährlösungen über alle gängigen voll implantierbaren Portsysteme indiziert. Die Anwendung erfolgt ausschließlich durch medizinisches Fachpersonal im häuslichen oder klinischen Umfeld.

Indikation

Gripstick® System kann bei allen Patientengruppen mit Krankheitsbildern zum Einsatz gebracht werden, die eine längerfristige intravenöse Therapie über ein Portsystem erforderlich machen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei der Anwendung sind die Hygienevorschriften der jeweiligen Gesundheitseinrichtung zu beachten.

Erklärung der Symbole



Hersteller



Vertrieb



Verwendbar bis



Fertigungslosnummer / Charge



Sterilisiert mit Ethylenoxid



Nicht erneut sterilisieren



Nicht wiederverwenden



Achtung



Einfach-Steril-Barriersystem



Vor Sonneneinstrahlung schützen



Trocken aufbewahren



Temperaturbegrenzung (gilt nur für die Lagerung!)



Artikelnummer



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Gebrauchsanweisung beachten



Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts



Europäisches Konformitätskennzeichen (CE-Kennzeichnung) mit Kennnummer der Benannten Stelle



Medizinprodukt

Warnhinweise

Die Gripstick® System ist nur zur Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

Die Gripstick® System muss wie alle herkömmlichen Sets zur Medikamentenverabreichung in Übereinstimmung mit der Fachinformation des Medikaments oder der Lösung angewendet werden.

Falls mehr als ein Medikament verabreicht werden soll, spülen Sie vor jeder Medikamentengabe das System und den Port mit Kochsalzlösung.

Die Kanüle besteht aus Edelstahl mit Nickelanteilen und kann bei Empfindlichkeit gegenüber Nickel zu allergischen Reaktionen führen.

Gebrauchte Produkte sind kontaminiert und müssen als kontaminierte Produkte entsprechend den Regeln der Gesundheitseinrichtung behandelt und entsorgt werden.

Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist oder wenn irgendwelche Informationen unleserlich oder beschädigt sind. Das Produkt nicht erneut sterilisieren.

Die Gripstick® System ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Materialien ihre ursprünglichen Eigenschaften verändern.

Die Schutzverpackung (Karton) dient auch als Lagerungsverpackung, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.

Bekannte Kontraindikationen

Keine / schlechte Lokalisation des Septums; Kammerdrehung des Ports; Aussickern / Auslaufen von Flüssigkeit; Fistel; Abszess; örtliche Infektion; ungewöhnliche Schmerzen an Einstichstelle; Exanthem; Erythem; Magnetresonanztomographie.

Medizinische Risiken unerwünschte Nebenwirkungen

Biologische Unverträglichkeit; Allergien; Infektion; Fehlpositionierung und Ausfluss des Medikamentes; Verstopfen der Nadel; Hautfistel durch wiederholtes Punktieren; Verbogene Nadelspitze; Verletzung durch Nadel; Blutung bei Nadelentfernung; Embolien; Schmerz; Komplikationen, wenn keine Spülung zwischen der Gabe verschiedener Medikamente durchgeführt wurde.

Sicherheitshinweise

Wiederverwendung

Die Gripstick® System ist ein Produkt zum Einmalgebrauch und darf nach Entfernung nicht wiederaufbereitet/wiederverwendet werden.

Anwendungsdauer

Die Anwendungsdauer des Produktes für einen ununterbrochenen Einsatz ist auf 7 Tage begrenzt.

Sterilität

Die Portnadeln werden mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert. Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Sterilverpackung vor dem Öffnen. Bitte beachten Sie das Ablaufdatum. Abgelaufene Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden, da die Sterilität nicht mehr sichergestellt werden kann.

Sicherheit nach dem Gebrauch

Gebrauchte Produkte sind kontaminiert und müssen entsprechend den Regeln der Gesundheitseinrichtung behandelt und entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Bitte melden Sie alle (schwerwiegenden) Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt an die angegebene Kontaktstelle des Herstellers, des Distributors (s.u.) und/oder ihre zuständige Behörde. Der Patient sollte umgehend den behandelnden Arzt über ungewöhnliche Symptome oder Reaktionen informieren.

Größen/Varianten

REF#	Nadeldurchmesser	Kanülenlänge
GSND1915	19 G	13 mm
GSND1920	19 G	15 mm
GSND1925	19 G	18 mm
GSND2015	20 G	15 mm
GSND2020	20 G	20 mm
GSND2025	20 G	25 mm
GSND2032	20 G	32 mm

Anwendung

Nadeleinführung

1. Bereiten Sie die Gripstick® System und die Portimplantationsstelle entsprechend der Hygienevorschriften ihrer Gesundheitseinrichtung vor. (Bsp. Abb. 1) Arbeiten Sie unter aseptischen Bedingungen; entnehmen Sie die Gripstick® System aus der Verpackung. (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

2. Entfernen Sie den Verschlusskonus vom proximalen Ende. Konnektieren Sie eine mit Kochsalzlösung gefüllte 10 ml Spritze und spülen Sie die Gripstick® System samt Schlauchverlängerung, um die Luft aus dem System zu entfernen. Schließen Sie die Schlauchklemme.



Abb. 3

3. Entfernen Sie die Schutzhülle durch leichtes Drehen. (Abb. 3)
4. Punktieren Sie das implantierte Portsystem (Abb. 4), indem Sie die Nadel senkrecht in das Septum einführen und sie so weit langsam vorschieben, bis die Nadelspitze Kontakt mit dem Portboden hat. (Abb. 5)
5. Drücken Sie den Griff zusammen und lösen Sie ihn von der Nadelplatte. (Abb. 5) Entsorgen Sie den Griff entsprechend den Vorschriften der Gesundheitseinrichtung.



Abb. 4



Abb. 5